

EASY PULSE®

CPR meccanica efficace e compatta grazie all'innovazione tecnologica

La CPR automatica di
ultima generazione

DISTRIBUZIONE
FORMAZIONE
ASSISTENZA TECNICA
PER L'ITALIA


**SAGO
MEDICA**
MEDICAL EQUIPMENT


www.sagomedica.it



SCHILLER
The Art of Diagnostics

EASY PULSE®

SCHILLER ha compiuto un passo avanti nel miglioramento della qualità della CPR con il lancio di un compressore toracico meccanico incredibilmente piccolo e leggero: EASY PULSE.

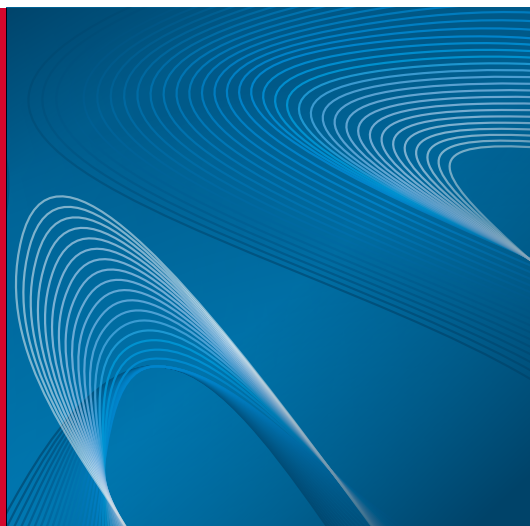

L'esecuzione manuale di compressioni toraciche in modo corretto per un periodo di tempo prolungato è pressoché impossibile. Tale attività non richiede solo un grande sforzo fisico, ma deve essere simultaneamente accompagnata anche da altre azioni, quale il monitoraggio dei parametri vitali.

EASY PULSE di SCHILLER è la soluzione per una rianimazione più efficace: questo dispositivo portatile e autonomo fornisce automaticamente compressioni toraciche a una frequenza e una profondità costanti. Essendo direttamente collegato alla parte superiore del corpo del paziente, può essere utilizzato in qualsiasi situazione, indipendentemente dalle condizioni ambiente. Soprattutto durante il trasporto, è possibile garantire compressioni toraciche di alta qualità senza interruzioni.

EASY PULSE è un dispositivo talmente semplice che può essere utilizzato da una sola persona. Le dimensioni e il peso sono ineguagliabili: EASY PULSE pesa infatti meno di 3,5 kg e offre così nuove possibilità, ad es. ai servizi di soccorso aereo.

DISPOSITIVI CPR AUTOMATICI DI ULTIMA GENERAZIONE

EASY PULSE è caratterizzato da una combinazione unica di pistone e fascia (Stamp & Band) che consente la compressione tridimensionale e quindi la massima efficienza.

Il peso del dispositivo è distribuito uniformemente sulla piastra di appoggio e non su un solo punto, per cui non influisce sulle compressioni toraciche o sull'indietreggiamento.



CURSORE

Il cursore agevola le operazioni di preparazione del paziente per le compressioni toraciche meccaniche. Richiede inoltre pochissimo tempo per il collegamento del dispositivo grazie al pratico sistema con fibbia: meno di 15 secondi per personale adeguatamente addestrato.



CARICABATTERIE

La batteria ricaricabile può essere ricaricata utilizzando un caricabatterie doppio (meno di 2 ore) o in modalità turbo (meno di 50 minuti) per una durata di circa 45 minuti.



FACILE DA UTILIZZARE

In caso di emergenza è importante fare sempre la mossa giusta. EASY PULSE è semplice e intuitivo da utilizzare: basta premere due pulsanti per avviare immediatamente la rianimazione.



ALIMENTAZIONE ESTERNA E CAVO DI CONNESSIONE DIRETTA

In dotazione viene fornito un alimentatore per una tensione di ingresso compresa tra 100 e 240 V c.a. EASY PULSE può essere utilizzato direttamente con una modalità di alimentazione compresa tra 12 e 24 V c.c. tramite uno speciale cavo di connessione.

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

Leggero

- ❖ Dispositivo CPR ad alimentazione elettrica incredibilmente piccolo e leggero, con un peso di 3,5 kg
- ❖ Ideale per spazi ristretti

Completo

- ❖ Compressioni toraciche multidirezionali (3D)
- ❖ Compressioni toraciche di alta qualità a una frequenza e una profondità costanti, impossibili da ottenere con compressioni manuali
- ❖ Possibilità di ciclo compressione-ventilazione 30:2

Semplice

- ❖ Grazie al sistema con cursore e fibbia, il dispositivo può essere facilmente collegato alla parte superiore del corpo
- ❖ Facile da posizionare – facile da utilizzare

Funzioni opzionali

- ❖ Batteria sostituibile con indicatore del livello di carica
- ❖ Funzionamento autonomo per 45 minuti (con una batteria)
- ❖ Connessioni: ingresso c.c. esterno, USB

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO



Sago Medica s.r.l.
Società Unipersonale
Direzione e coordinamento
di Sago Medica Holding s.r.l.

Via Zallone, 25
40066 Pieve di Cento
Bologna, Italy
Tel. +39 0516860811
Fax +39 0516861246
info@sagomedica.it
www.sagomedica.it



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co., Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E5-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
Bellshill, ML4 3PR
Phone +44 1698 744 505
Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com



SCHILLER
The Art of Diagnostics