

SAM
MEDICAL

DISTRIBUZIONE
FORMAZIONE
ASSISTENZA TECNICA
PER L'ITALIA

**SAGO
MEDICA**
MEDICAL EQUIPMENT

www.sagomedica.it

SAM® Soft Shell

MODELLA. RINFORZA. SUPPORTA.

COMFORT FLESSIBILE


La stecca SAM® Soft Shell è realizzata con lo stesso principio costruttivo rivoluzionario C-Curve™ della stecca SAM® Splint originale: la robustezza delle curve. Grazie alla sua insuperata flessibilità, la stecca SAM® Soft Shell si piega formando un semplice arco, diventa gradualmente più robusta e acquisisce una maggiore capacità di supporto per l'immobilizzazione di distorsioni, stiramenti e fratture minimamente scomposte.



TECNOLOGIA APPLICATA

PRINCIPIO C-CURVE™ ADATTABILE

La stecca SAM® Soft Shell si avvale del principio rivoluzionario C-Curve™ per modellare gli strati di gommapiuma e alluminio in archi strutturali che sono sufficientemente robusti per rispondere alle esigenze pre- e post-applicazione del gesso, rimanendo al tempo stesso più leggera e trasportabile delle stecche tradizionali che utilizzano materiali pesanti e rigidi. Riportandola alla forma originale può essere di nuovo modellata.

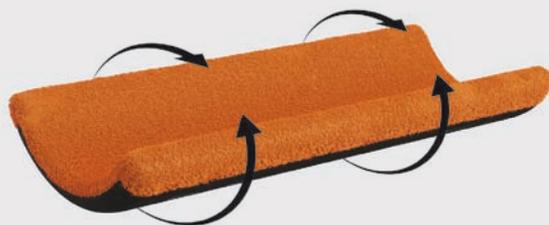

PROGETTATA PER UN SUPPORTO VERSATILE


- 1 **SUPERFICIE ESTREMAMENTE CONFORTEVOLE**
Il tessuto di spugna assorbente copre la superficie a contatto con la pelle, offrendo il massimo comfort.
- 2 **ALLUMINIO MODELLABILE**
L'alluminio ricotto piatto all'interno dello strato esterno della stecca è facilmente modellabile, consentendo una vasta gamma di applicazioni.
- 3 **MATERIALE RADIOTRASPARENTE**
Consente di eseguire radiografie e scansioni TC senza dover togliere la stecca dall'arto fratturato o lesionato.

- 4 **LA MISURA GIUSTA**
La linea completa di prodotti include la maggior parte delle misure necessarie, fra cui XL e Sugar Tong (a molletta).
- 5 **BORDI CON CONTROLLO DELLA RESISTENZA**
Le estremità rigide ed extra-rigide permettono livelli diversi di resistenza al movimento, secondo la necessità. (Non disponibile nella versione Sugar Tong.)

RIGIDA

—OPPURE—

EXTRA-RIGIDA

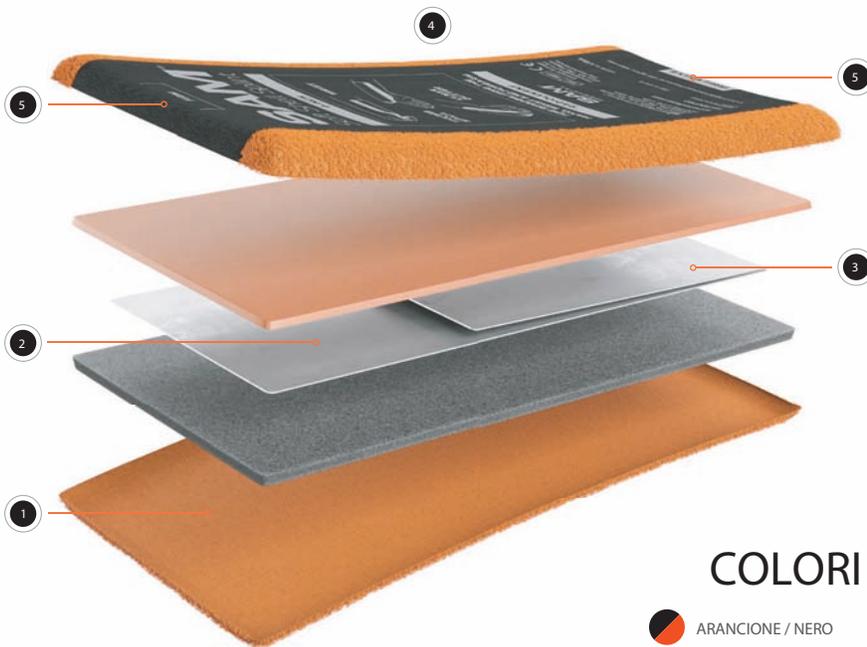

COLORI

-  ARANCIONE / NERO
-  NERO / NERO

MODELLI



STANDARD

Larghezza 10,8 cm (4,25 in)



XL

Larghezza 14 cm (5,5 in)



SUGAR TONG

Pediatrico, Adulti, Adulti XL



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

MODELLI DISPONIBILI

22,9 cm (9") (SC042668)	3,1 cm (15") (SC121802)
22,9 cm (9") XL (SC042668XL)	3,1 cm (15") XL (SC121802XL)
30,5 cm (12") (SC122069)	
30,5 cm (12") XL (SC122069XL)	

MODELLI SUGAR TONG

Pediatrico (ST052106P)
Adulti (ST052106)
Adulti XL (ST052106XL)



Emergo Europe, Prinsessegracht 20,
2514 AP, L'Aia, Paesi Bassi



RADIOTRASPARENTE



COMPATIBILITÀ RM CONDIZIONATA A 3 T



SAM Medical Products
27350 SW 95th Ave, Ste 3038
Wilsonville, OR 97070 USA

* Larghezza Standard 10,8 cm (4,25 in), XL 14 cm (5,5 in).
SAM® è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.
©2017 SAM Medical Products. Tutti i diritti riservati.

sammedical.com

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO



Sago Medica s.r.l.
Via Zallone, 25
40066 Pieve di Cento
Bologna, Italy
Tel. +39 0516860811
Fax +39 0516861246
info@sagomedica.it
www.sagomedica.it